




Käesolev toode vastab kõikidele
Euroopa Parlamendi asjakohastele
määrustele. Täielik CE-deklaratsioon
koos kohaldatavate katsestandarditega
leidub allalaetavana meie kodulehel
aadressil www.s2g.info

Mobiset GmbH - Rösrather Straße 333 -
51107 Köln
Tel: +49 22 19 89 52 0 - Faks: +49 22 19
89 52 39

Digitaalne alkomeeter

Digitaalse ekraaniga alkomeeter.

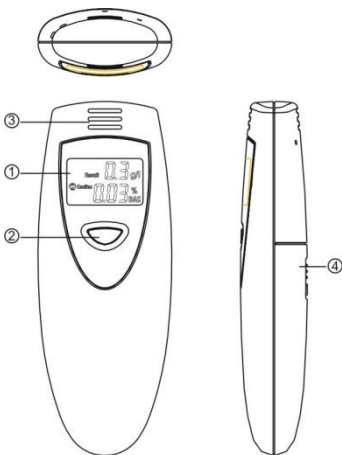

1) LCD ekraan
3) puhumisavad

2) sisse-/väljalülitamine
4) patareisahtel




Omadused

1. Helilise hoiatusega puhumisõhu analüüsimine
2. Vahemik 0.00-0,19%BAC 6 0.0- 1,9g/l (ehk 0.00-0,95mg/l BRAC)
3. Kiire arvutamine ja tulemus
4. Automaatne väljalülitumine

Patareide paigaldamine

1. Avage patareisahtel, lükates selle kaane alla.
2. Paigaldage kaks 1,5V AAA patareid, jälgige, et nende asend oleks selline nagu sahtlis näidatud.
3. Sulgege patareisahtel.

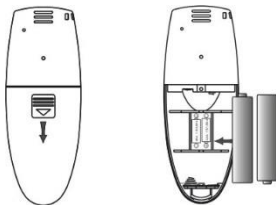

Alkomeetri kasutamine

Ettevalmistamine

1. Vajutage üks kord sisse- / väljalülitamisnuppu, ekraan süttib ning kostab helisignaal



2. Ekraanil kuvatakse soojendussümbolit ning algab 10-st 0-ni taguripidi loendus, alkomeeter on ettevalmistavas režiimis

Märkus

Esmakordsel kasutamisel või pärast pikka mittekasutamist võib


alkomeetril esineda gaasi- või õhureostus.

Sel juhul vajab see mitut ettevalmistamisetappi, lülitage alkomeeter mitu korda sisse / välja.

Kasutamine

1. Ekraanil kuvatakse puhumissümbolit ja algab tagurpidi loendamine

10-st 0-ni, alkomeeter on kasutusvalmis.

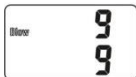

2. Pange oma suu puhumisavade lähedale ja puhuge nendesse umbes 3-5 sekundit.
3. Vaadake ekraanilt tulemust.

4. Kui väärtus ulatub 0,02%BAC (ehk 0,2g/l) kuni 0,05% (ehk 0,5g/l), kuvatakse ekraanil hoiatussümbolit:

- ☒ 0.02% BAC (ehk 0.2g/l) kuni 0.05% BAC (ehk 0.5g/l).
☐ 0.05% BAC (ehk 0.5g/l) kuni 0.08% BAC (ehk 0.8g/l).




5. Kui väärtus ulatub 0,05 BAC (ehk 0,5g/l), kuvatakse ekraanil hädahoiusümbolit:

- ☒ üle ja võrdne 0.05% BAC (ehk 0.5g/l).
☐ üle ja võrdne 0.08% BAC (ehk 0.8g/l)

Automaatne väljalülitamine

1. Mõõtmistulemust kuvatakse umbes 15 sekundit, seejärel kuvatakse umbes 2-3 sekundit väljalülitumissümbolit ning alkomeeter lülitub välja.

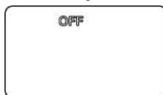

2. Kui puhumisel hingeõhus alkoholi ei leidu, kuvatakse ekraanil tulemuseks 0.0.

Märkus

Täpse tulemuse saamiseks soovitame mõõta vähemalt kaks korda.


Aku tühjenemise kuvamine

Kui sisselülitamisel on näha vilkuv L sümbol, on patareid tühjenemas, vahetage need.

Vahetage patareid vähemalt siis, kui seadet ei ole võimalik sisse lülitada või see ei suuda siseneda ettevalmistavas režiimi.

Käerihm

Paigaldage kaasasolev käerihm järgneva pildi järgi

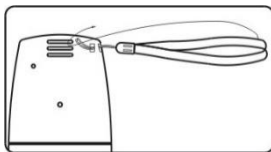

Spetsifikatsioonid

- Sensor: täiustatud hapniku- / alkoholisensor
- Vahemik: 0.00-0.19% BAC ja 0,0-1,9 BRAC
- Täpsus: 0,01% BAC (0,1g/l)
- Toide: 2 x 1.5v AAA patareid
- Ettevalmistusfaas: 10 sekundit, tulemuste kuvamine 5 sekundi pärast
- Automaatne väljalülitamine 35 sekundi pärast
- Suurus: 95x36x18mm.

Ettevaatusabinõud

- Pärast alkoholi tarbimist on soovitatav oodata enne mõõtmist 20 minutit, kuna alkoholil kulub 20 minutit seedeorganitest verre imendumiseks ning suhu jäänud alkoholijääkidel kulub hajumiseks sama kaua.
- Täpse tulemuse saamiseks ärge korrake mõõtmist 3 minuti jooksul pärast viimast korda.
- Enne mõõtmist ärge suitsetage ega sööge umbes 20 minutit.
- Ärge kasutage alkomeetri puhastamiseks kemikaale, nagu benseeni, vedeldit või bensiini.
- Ärge puhuge puhumistorusse vedelikku.
- Ärge kasutage alkomeetri läheduses ergutavaid aineid, nagu värvid, insektitsiidid, alkoholid.
- Ärge pange alkomeetrit saastunud õhuga suletud keskkonda.
- Seadme seesmiste osade muutmine või omavoliline avamine võib rikkeid põhjustada.
- Seade on mõeldud mõistliku liiklemise soodustamiseks. Seda ei tohiks kasutada eeldusena sõidukite, masinate või seadmete kasutamisel või juhtimisel. Seade ei anna viiteid ega muid näitajaid vere alkoholisisalduse või muude selliste joobeseisundite kohta, mida on avaldanud valitsus-, meditsiini- või muud asutused või organisatsioonid. Alkomeeter näitab alkoholisisaldust veres (BAC - blood alcohol content) ainult teadmiseks võtmiseks, tootja ei võta endale mingit õiguslikku vastutust.
- Iga isiku organism reageerib alkoholile erinevalt. Isiku juhtimisvõime võib halveneda juriidiliselt ka punktis, mis on allpool seaduses ettenähtud alkoholisisalduse piiri veres.